



Belegung

FS-SE-54

ID 0,25mm, df 0,50µm, Länge 50m
94% Methyl- 5% phenyl- 1% vinylsilikon
Max. Temperatur: 300/320°C

Dimensionen

50 m x 0,25 mm ID, df 0,5 µm

Artikel Nr.

[225054](#)

Probe

Pestizide

Substanzen: Alpha-HCH / Beta-HCH / Lindan / Heptachlor / Aldrin /
Heptac-Epo / PP-DDE / Dieldrin / OP-DDD / Endrin / PP-DDD /
OP-DDT / PP-DDT

Ofen


1 min 120°C, dann mit 30°C/min auf
170°C, 20 min halten, dann mit 2°C/min
bis 200°C, 10 min halten, dann mit 5
°C/min bis 260°C, 30 min halten

Trägergas

1,8 bar Stickstoff

Detektor

FID 350°C

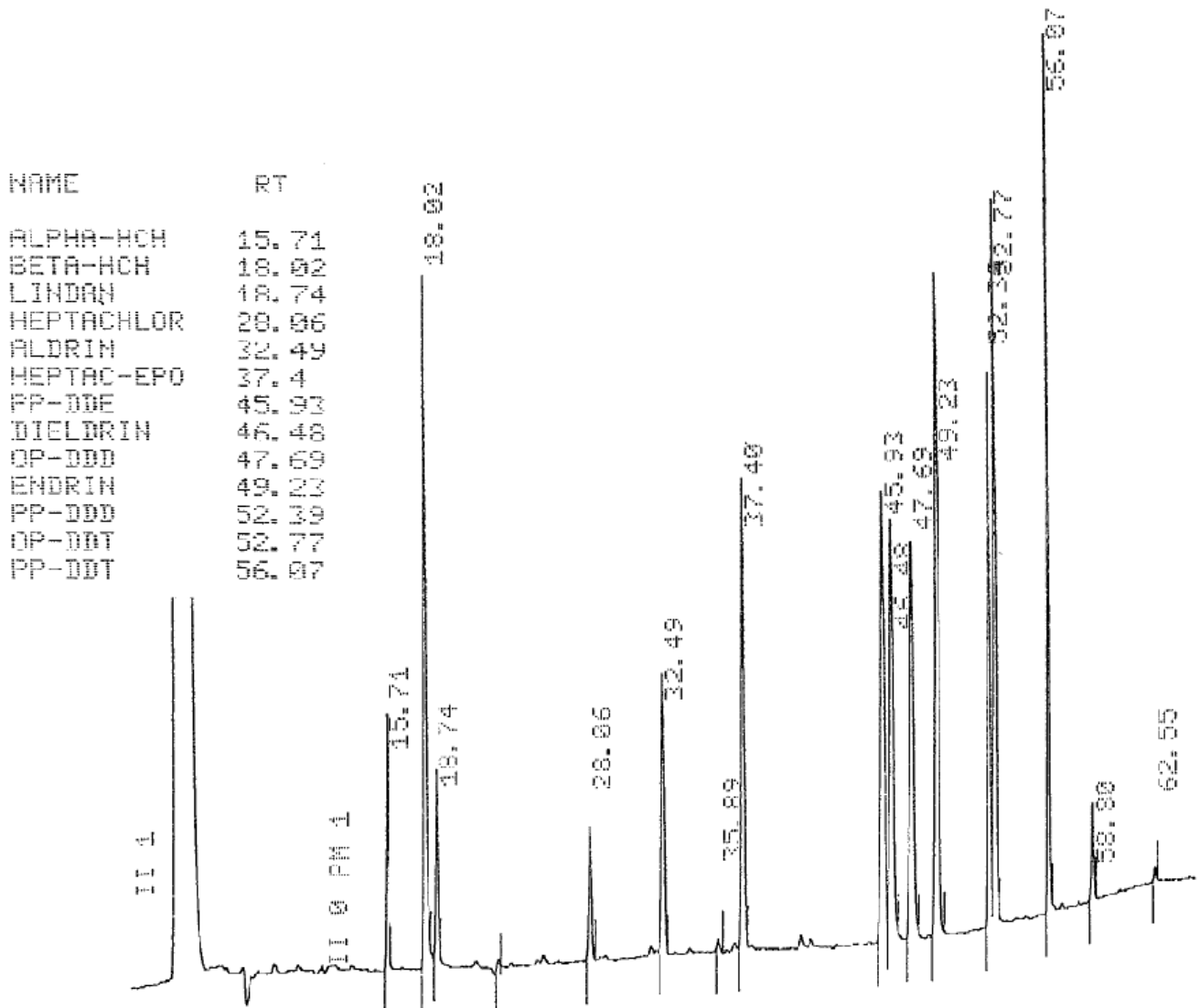



1.) HCH-Isomere

2.) Lindan

3.) Heptachlor

4.) Aldrin

5.) Heptachlorepoxid

6.) DDE-Isomere

7.) Dieldrin

8.) DDD-Isomere

9.) Endrin

10.) DDT-Isomere