

Belegung

FS-Innopeg-1000

ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 25m

Max. Temperatur: 240/260°C

Dimensionen

25 m x 0,25 mm ID, df 0,25 µm

Artikel Nr.

[22516725](#)

Probe

Acetonitril/Propylpropionat/1-Propanol/P
ropionsäure

Ofen


60°C, 5 min, 30°C/min, 150°C, 5min

Trägergas

0,3 bar H₂

Detektor

FID 320°C

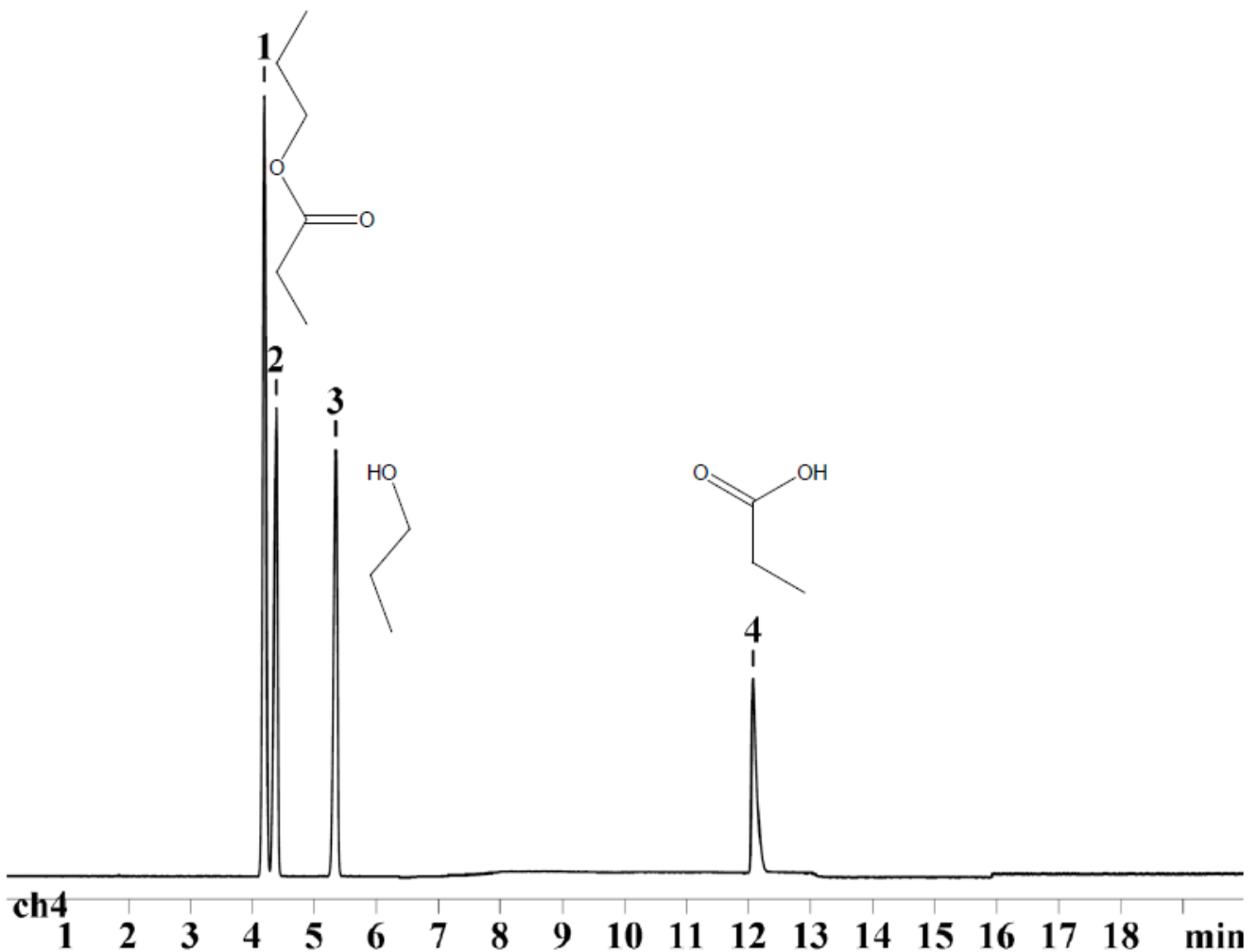

1.) Acetonitril

3.) 1-Propanol

2.) Propylpropionat

4.) Propionsäure