

Belegung

FS-Innopeg-2000

Dimensionen

60 m x 0,32 mm ID, df 0,35 µm

Artikel Nr.

[23217260](#)

Probe

Verunreinigungen in Ethanol

Substanzen: Ethanol / Methylacetat / Ethylacetat / Methanol /
Isopropanol / n-Propanol / iso-Butanol / n-Butanol

Ofen


80°C, 7 min; 10°C/min, 150°C

Trägergas

1,2 bar N₂

Detektor

FID 320°C

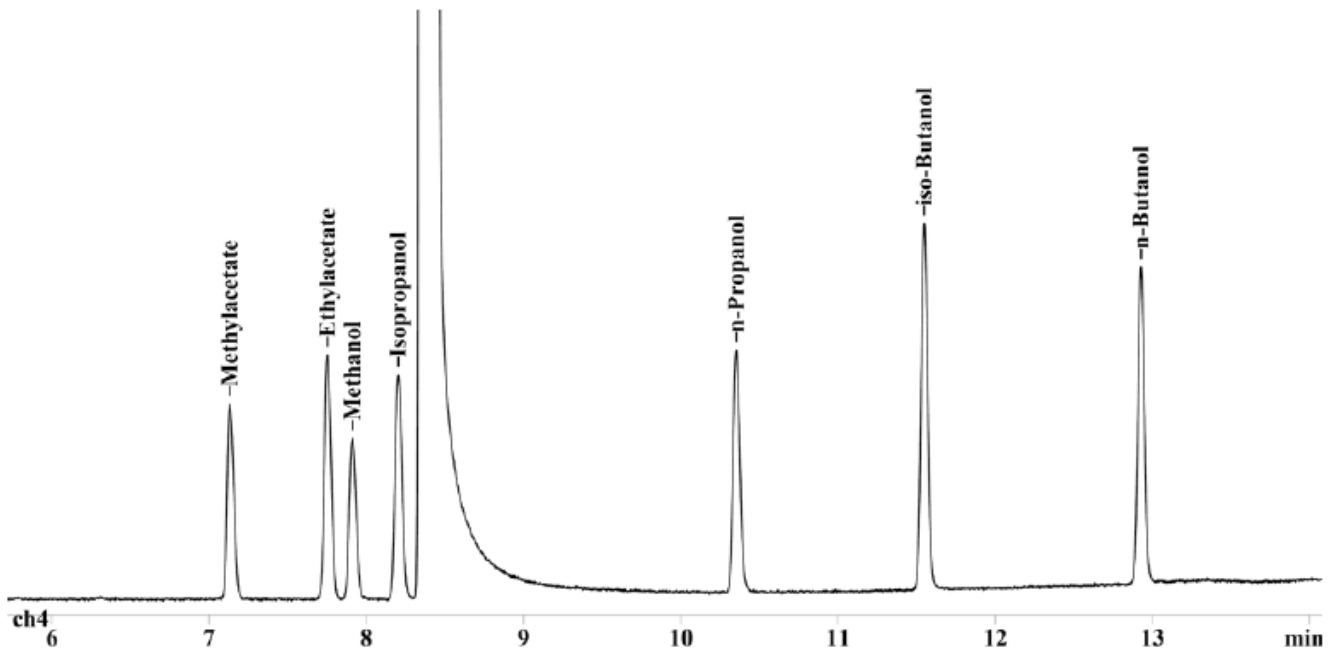

1.) Essigsäuremethylester

5.) n-Propanol

2.) Essigsäureethylester

6.) Isobutanol

3.) Methanol

7.) n-Butanol

4.) Isopropanol