

Belegung

FS-Innopeg-FFAP

ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 30m

Max. Temperatur: 240/260°C

Dimensionen

30 m x 0,25 mm ID, df 0,25 µm

Artikel Nr.

[22517430](#)

Probe

BTX-Testmischung

Substanzen: Benzol / Toluol / Ethylbenzol / p-Xylol / m-Xylol / o-Xylol

Ofen


80°C isotherm

Trägergas

0,5 bar N2

Detektor

FID 320°C

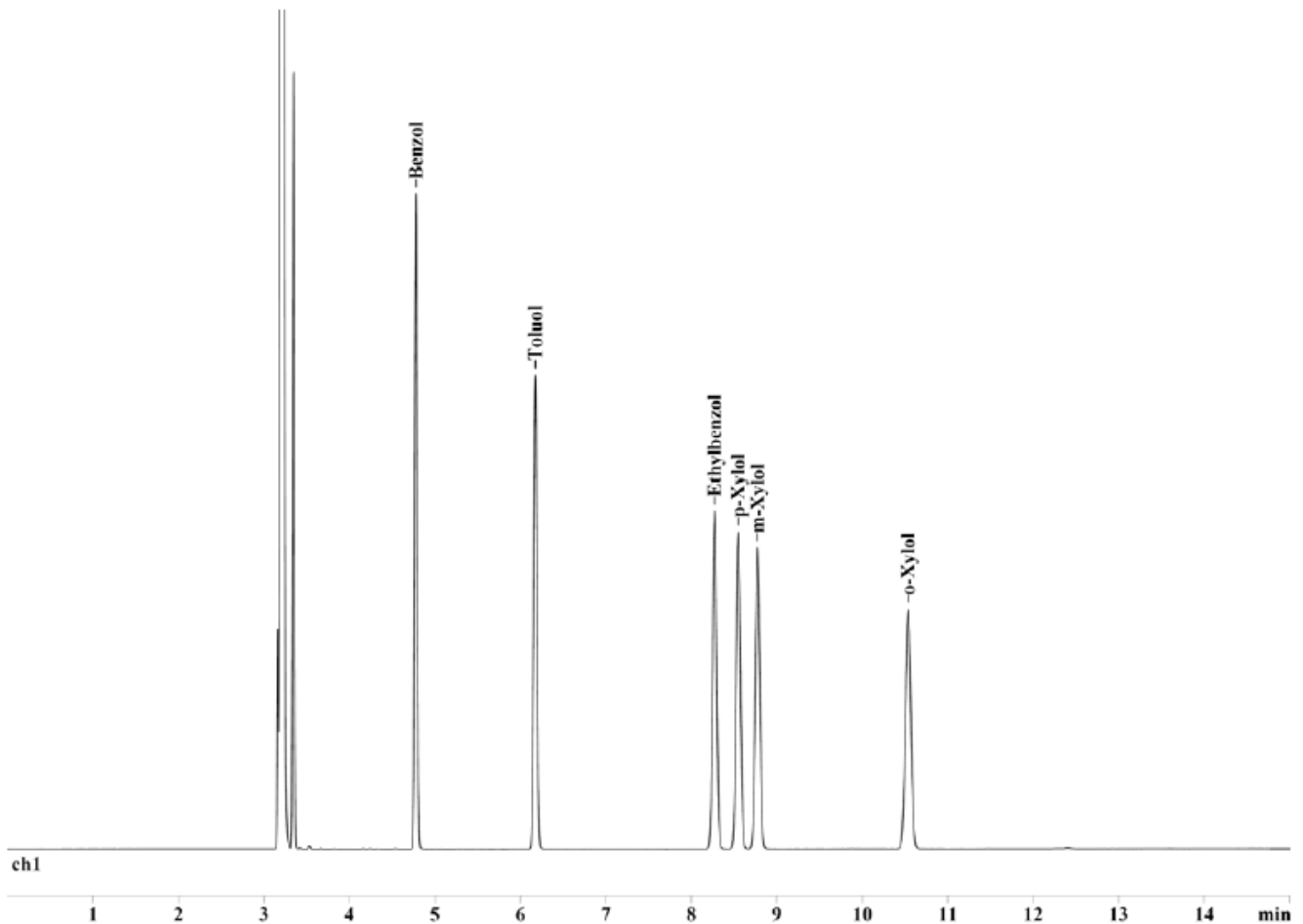

1.) Benzol

4.) p-Xylol

2.) Toluol

5.) m-Xylol

3.) Ethylbenzol

6.) o-Xylol