

Belegung

FS-FS-OV-1-CB-5

Dimensionen

30 m x 0,32 mm ID, df 5,2 µm

Artikel Nr.

[23210730](#)

Probe

Chlorsilane in DMF

Substanzen: TMCS / DMCS / EtTCS / DMF / BDMCS

Ofen


80°C isotherm

Trärgas

0,5 bar N₂

Detektor

FID 250°C

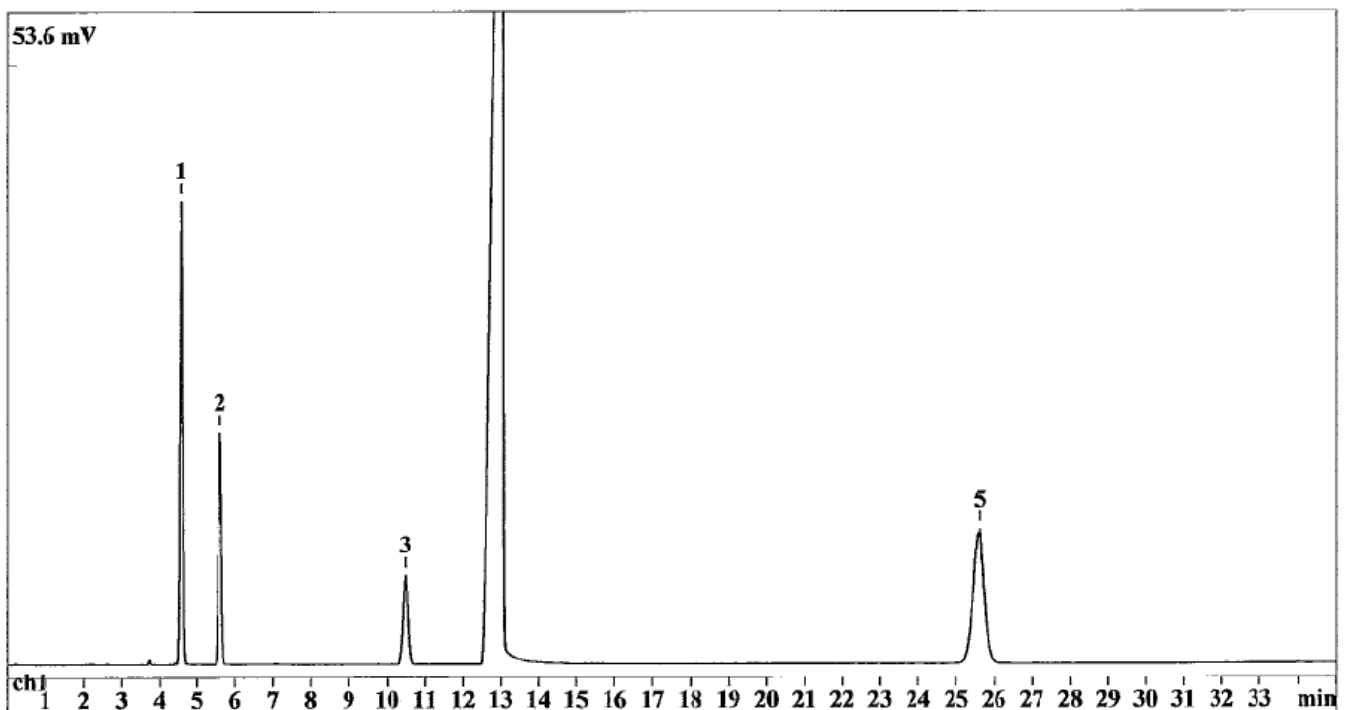

1.) Trimethylchlorsilan

4.) Dimethylformamid

2.) Dimethyldichlorsilan

5.) tert.-Butyldimethylchlorsilan

3.) Ethyltrichlorsilan