

Belegung

FS-OV-1

Dimensionen

50 m x 0,25 mm ID

Artikel Nr.

[225024](#)

Probe

Alkane/Alkene

Substanzen: 2-Methylbutan / Penten-1 / 2-Methylbuten-1 /  
trans-Penten-2 / cis-Penten-2 / 2-Methylbuten-2 / 4-Methylpenten-1 /  
3-Methylpenten-1 / 2,3-Dimethylbuten-1 / cis-4-Methylpenten-2 /  
trans-4-Methylpenten-2 / 2-Methylpenten-1 / Hexen-1 / 2-Ethylbuten-1  
/ n-Hexan / trans-Hexen-3 / cis-Hexen-3 / trans-Hexen-2 /  
2-Methylpenten-2 / cis-Hexen-2 / 2,3-Dimethylbuten-2

Ofen


20 min 30°C isotherm, dann TP bis  
250°C

Trägergas

1,5 bar He

Detektor

FID 250°C, 1 x 32

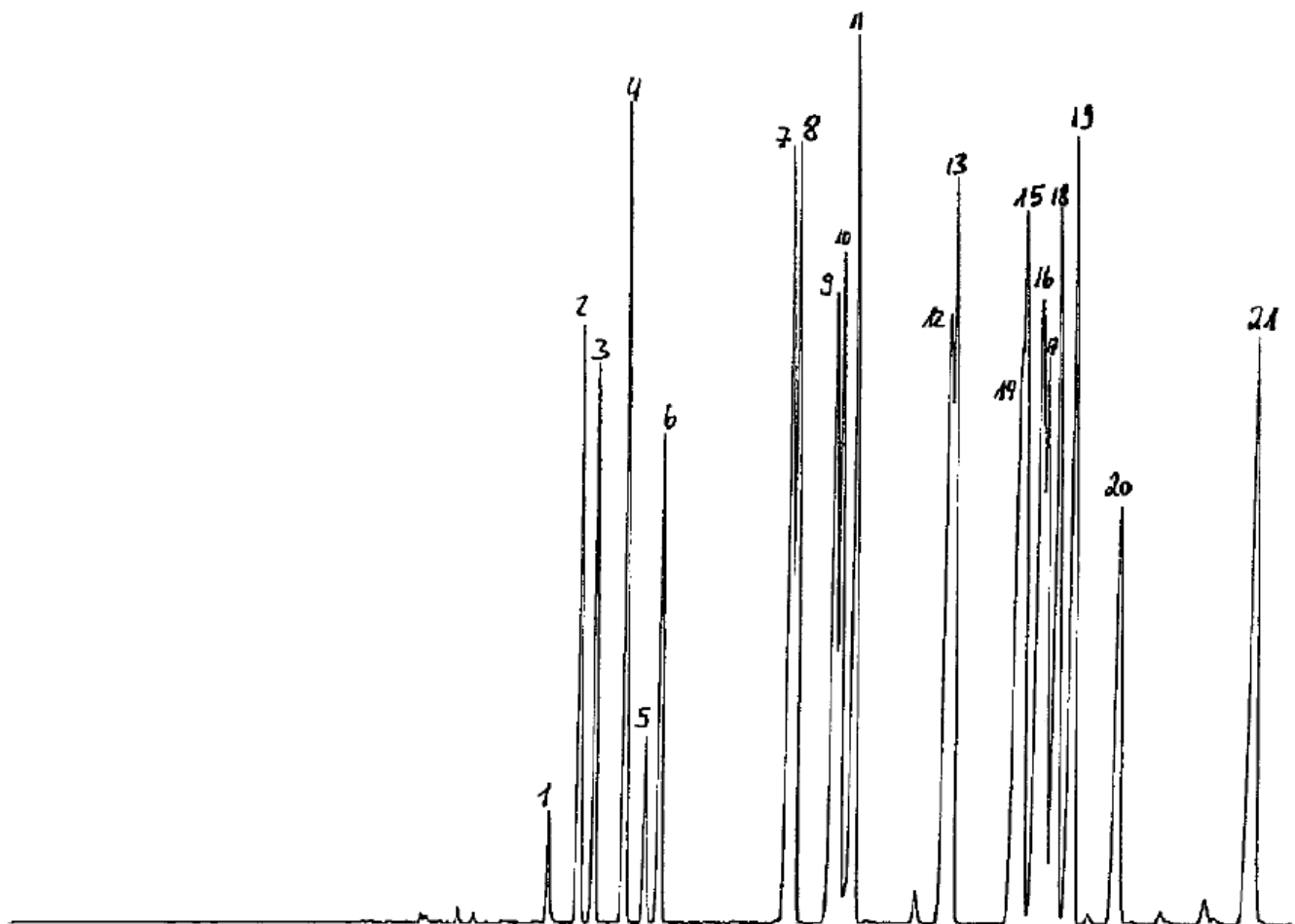

1.) Butan-Isomere

3.) Hexan-Isomere

2.) Pentan-Isomere