

Belegung

FS-Innopeg-1000

Dimensionen

12 m x 0,15 mm ID, df 0,2 µm

Artikel Nr.

[21516730](#)

Probe

Mirabelle

Substanzen: Acetaldehyd / Methylacetat / Ethylacetat / Methanol / Ethanol / 1-Propanol

Ofen


40°C, 5 min; 10°C/min, 150°C, 10 min

Trägergas

0,4 bar N₂

Detektor

FID 340°C

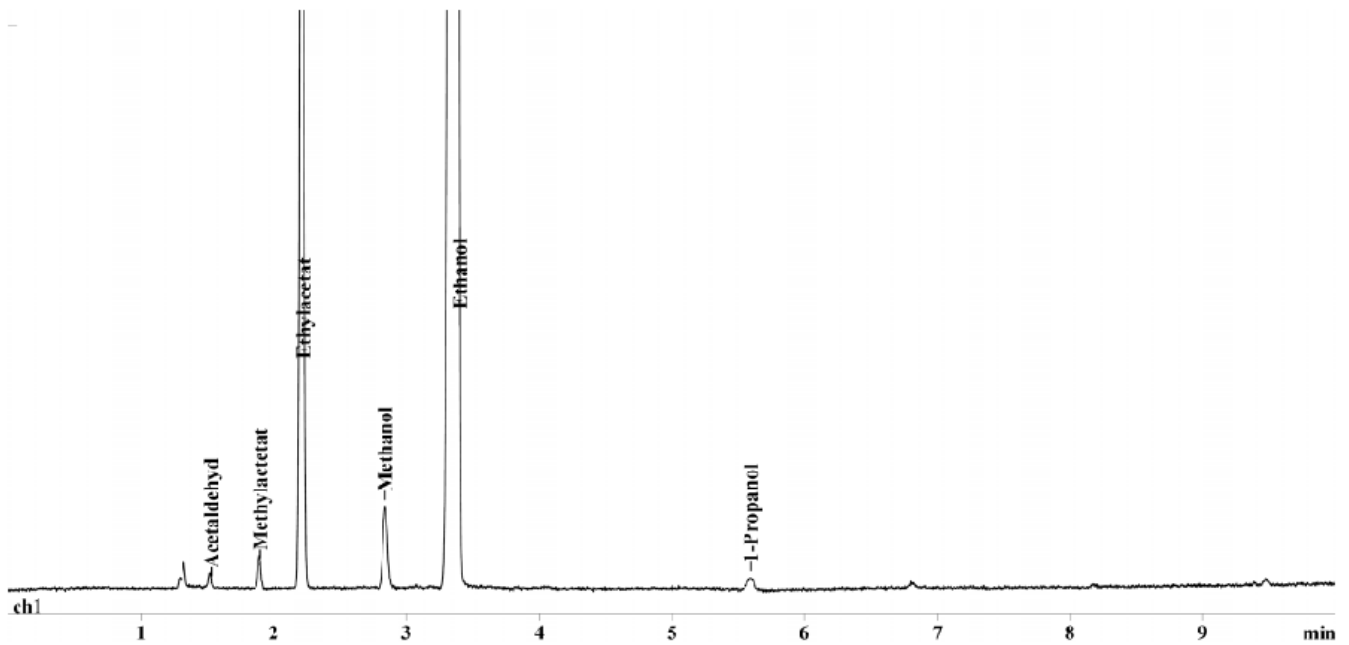

- 1.) 1-Propanol
- 2.) Acetaldehyd
- 3.) Essigsäuremethylester

- 4.) Essigsäureethylester
- 5.) Methanol
- 6.) Ethanol