



Belegung

FS-FFAP

ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 25m
PEG 20000 partiell verestert mit
2-Nitroterephthalsäure
Max. Temperatur: 220°C

Dimensionen

25 m x 0,25 mm ID

Artikel Nr.

[225083](#)

Probe

Fettsäuremethylestermischung

Ofen


90-240°C mit 6°C/min

Trärgas

0,85 bar H₂ x Split 1:20

Detektor

FID 250°C 10 x 16

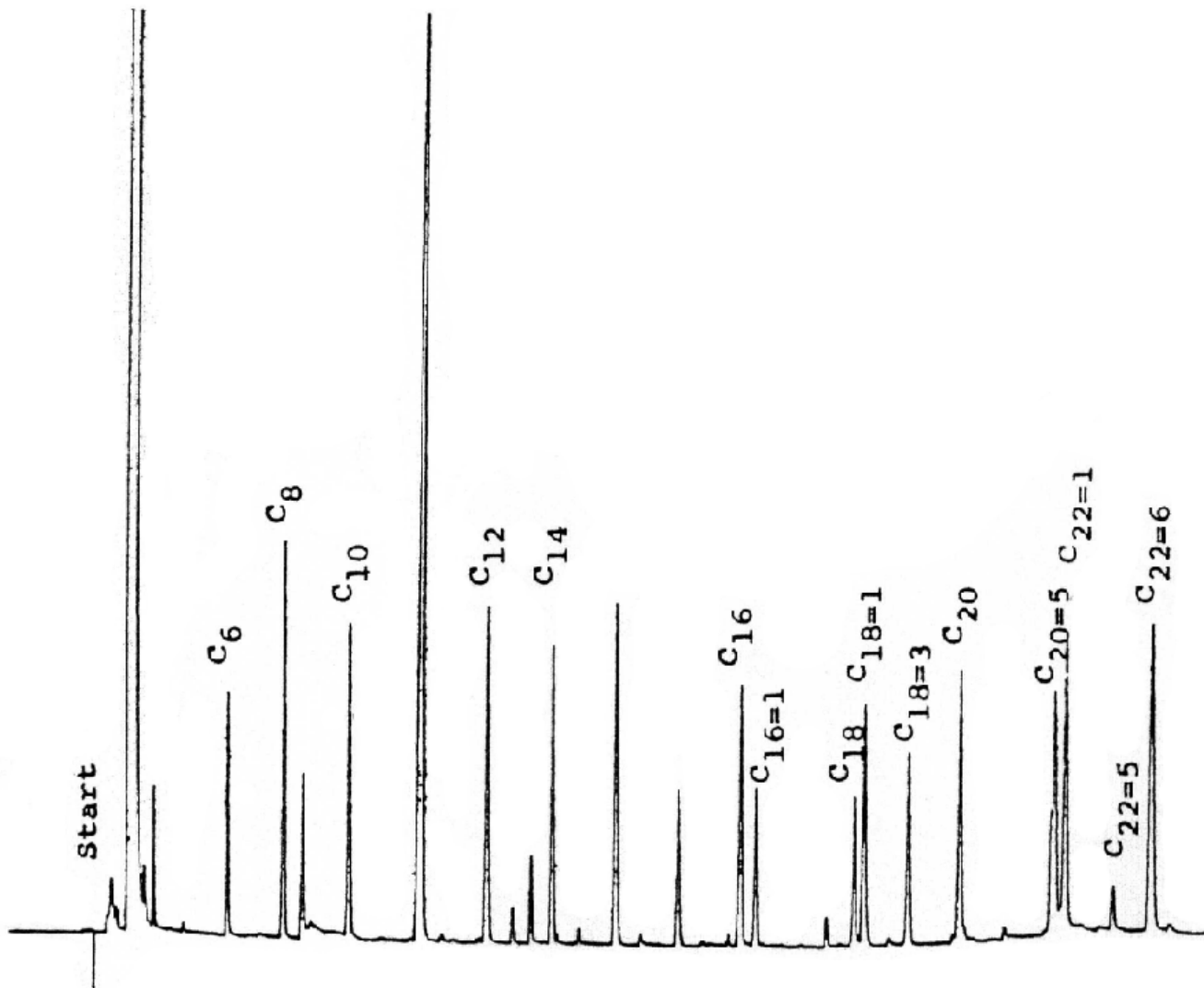

1.) FAME