




Belegung	FS-CW 20M
Dimensionen	50 m x 0,32 mm ID
Artikel Nr.	<a href="#">232999</a>
Probe	Trennung von leichtflüchtigen Lösungsmitteln <small>Substanzen: n-Hexan / Methyl-tert.-butyl-ether / Iso-Propanol</small>
Ofen	80°C isotherm
Trärgas	1 bar N2 x Split 1:50
Detektor	FID 240°C, 10 x 16

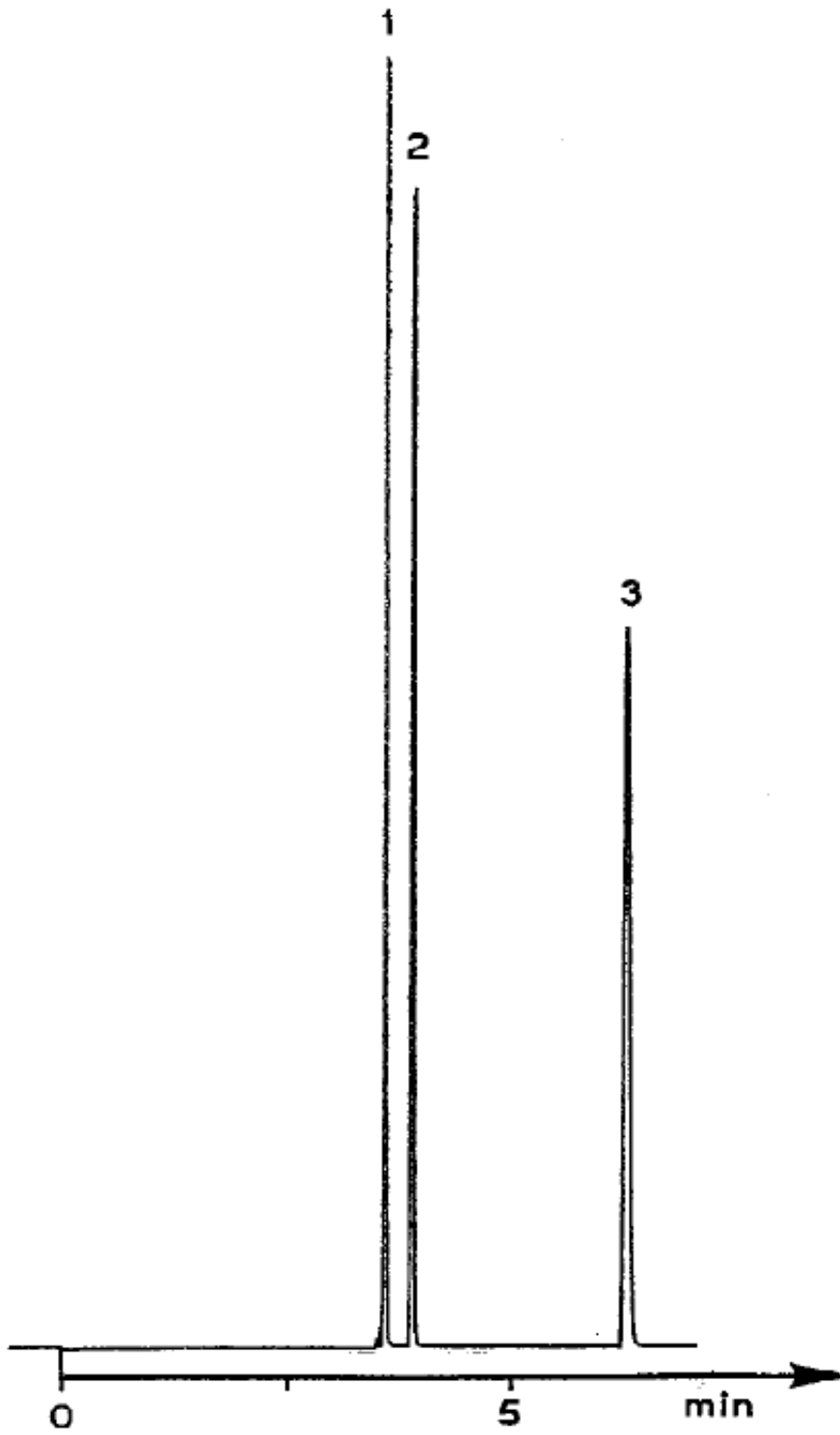

1.) n-Hexan

2.) Methyl-tert.-butylether

3.) Isopropanol