



Belegung

FS-SE-54

ID 0,32mm, df 5µm, Länge 50m

94% Methyl- 5% phenyl- 1% vinylsilikon

Max. Temperatur: 300/320°C

Dimensionen

50 m x 0,32 mm ID

Artikel Nr.

[232105](#)

Probe

Trennung von leichtflüchtigen  
Lösungsmitteln

Substanzen: Ethanol / Aceton / Iso-Propanol


Ofen

40°C isotherm

Trärgas

0,5 bar N2

Detektor

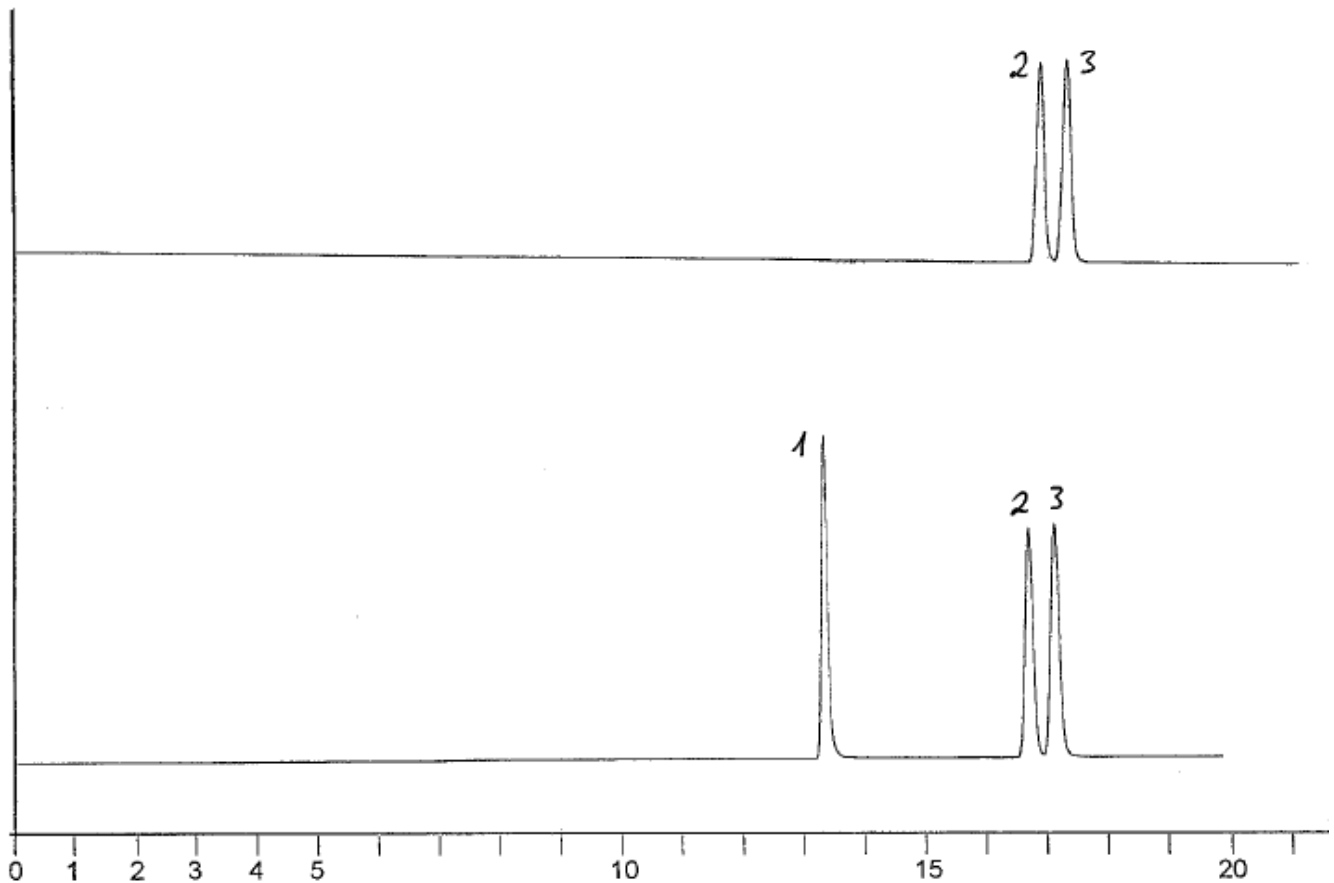

1.) Ethanol

3.) Isopropanol

2.) Aceton