

Belegung

FS-FFAP

ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 50m  
PEG 20000 partiell verestert mit  
2-Nitroterephthalsäure  
Max. Temperatur: 220°C

Dimensionen

50 m x 0,25 mm ID

Artikel Nr.

[225084](#)

Probe

BTX-Testlösung

Substanzen: Benzol / Toluol / Ethylbenzol / p-Xylol / m-Xylol / o-Xylol

Ofen


80°C isotherm

Trärgas

1 bar N2, Splitausgang 20 ml/min

Detektor

FID. 1 x 8

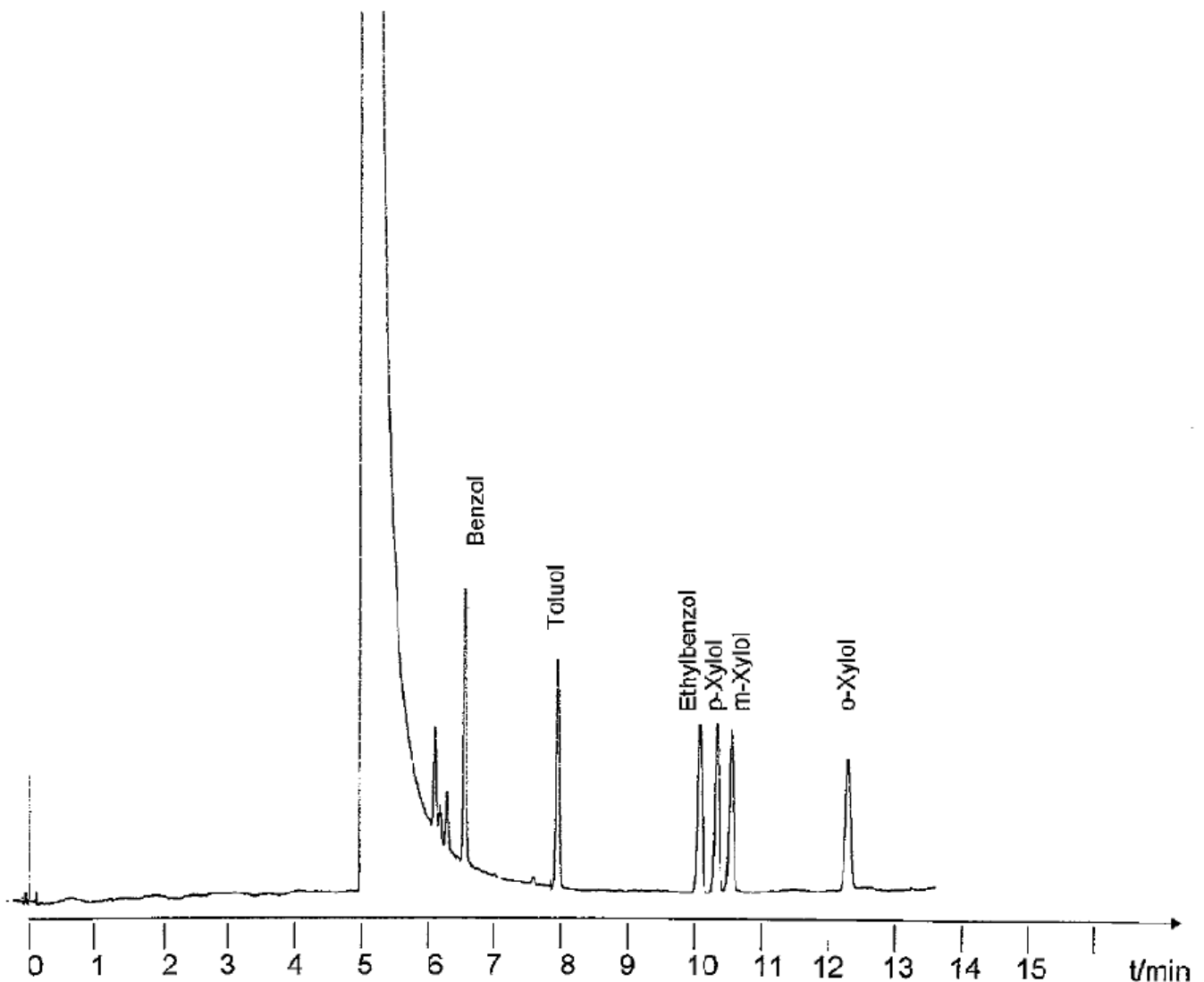

1.) Benzol

4.) p-Xylol

2.) Toluol

5.) m-Xylol

3.) Ethylbenzol

6.) o-Xylol

