

Belegung

FS-Silar-10C

Dimensionen

50 m x 0,32 mm ID, df 0,23 µm

Artikel Nr.

[132099](#)

Probe

Alkohol-Testmischung

Substanzen: n-Hexanol / n-Heptanol / n-Octanol / n-Nonanol /  
n-Decanol

Ofen


80-180°C mit 8°C/min

Trärgas

0,9 bar N<sub>2</sub> x Split 1:50

Detektor

FID 280°C, 10 x 8

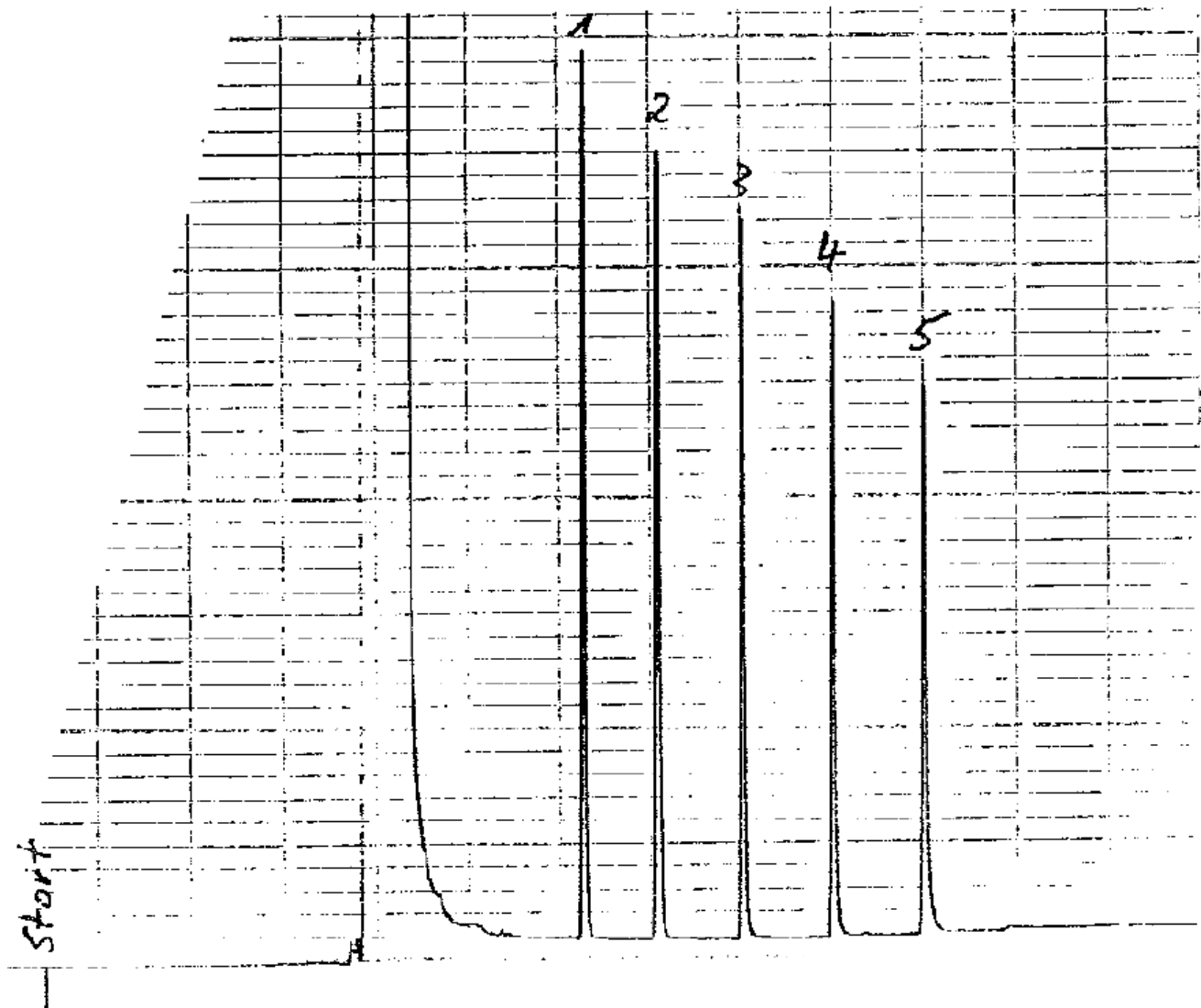

1.) 1-Hexanol

4.) n-Nonanol

2.) n-Heptanol

5.) n-Dekanol

3.) n-Oktanol

