



Belegung

FS-SE-54

Dimensionen

50 m x 0,32 mm ID

Artikel Nr.

[232054](#)

Probe

CS-Testmischung

Substanzen: n-Dekan / n-Undekan / Oktanol / 2,6-Dimethylanilin /
2,6-Dimethylphenol / Dicyclohexylamin / Dekansäuremethylester /
Undekansäuremethylester / Dodekansäuremethylester

Ofen


80-280°C mit 8°C/min

Trägergas

1,1 bar N₂ x Split 1:50

Detektor

FID 250°C, 10 x 16

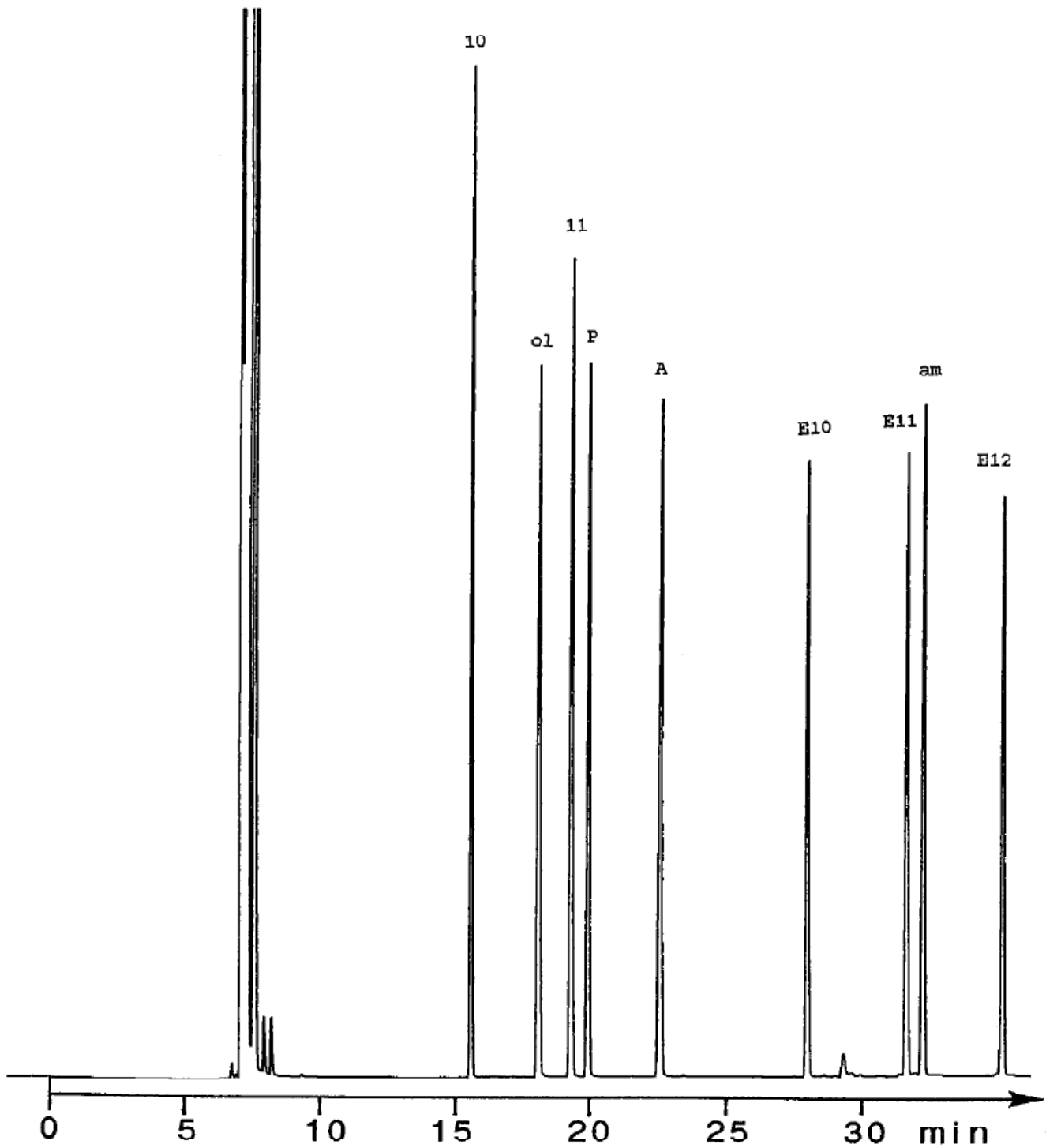

- 1.) n-Dekan
- 2.) n-Oktanol
- 3.) n-Undekan
- 4.) 2,6-Dimethylphenol
- 5.) 2,6-Dimethylanilin

- 6.) Dekansäuremethylester
- 7.) Undekansäuremethylester
- 8.) Dicyclohexylamin
- 9.) Dodekansäuremethylester