



Belegung

FS-FFAP

ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 50m
PEG 20000 partiell verestert mit
2-Nitroterephthalsäure
Max. Temperatur: 220°C

Dimensionen

50 m x 0,25 mm ID

Artikel Nr.

[225084](#)

Probe

Ameisensäure/Methanol in Wasser

Ofen


120°C isotherm

Trärgas

1 bar N2 x Split 1:15

Detektor

FID, 10x 4

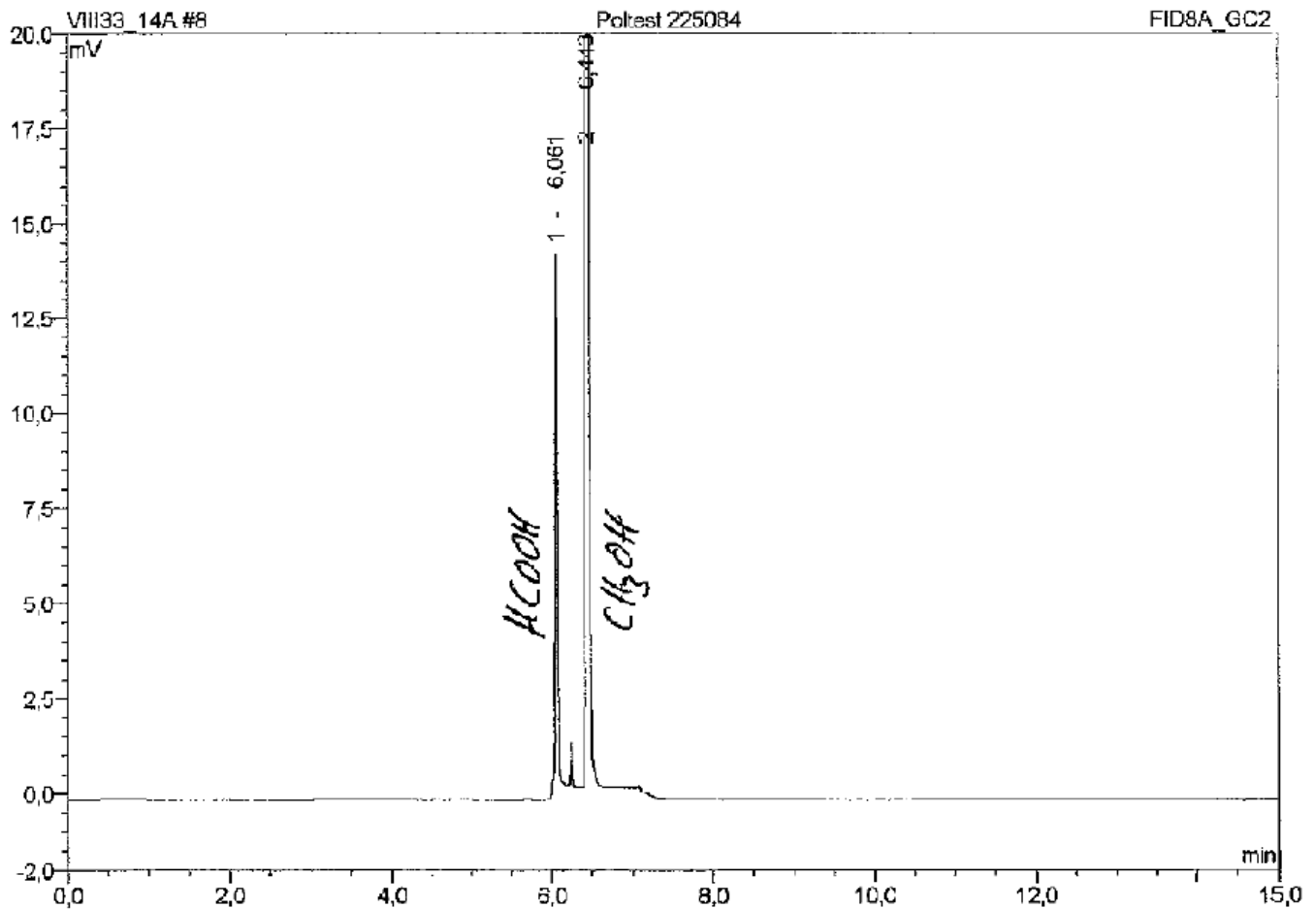

1.) Ameisensäure

2.) Methanol